

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Киров +7 (8332) 20-58-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Курск +7 (4712) 23-80-45	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Казань +7 (843) 207-19-05	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Калуга +7 (4842) 33-35-03	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: brookfield.pro-solution.ru | эл. почта: bfb@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Принадлежности

Принадлежности к анализатору текстуры СТЗ

Каждый анализатор текстуры СТЗ готов к работе сразу после поставки. В комплект поставки входит:

- - анализатор текстуры СТЗ
- - силоизмерительная ячейка (диапазон определяется при заказе)
- - ПО Texture Loader
- - кабель USB для подключения к компьютеру

Дополнительно необходимо

- Вращающийся предметный стол или стол для креплений образцов.
- Как минимум один датчик или испытательное приспособление.

Дополнительные принадлежности

- Прибор СТЗ обладает широким спектром датчиков, креплений и зажимов, что значительно расширяет функциональность прибора. Компания Brookfield также может специально разработать крепежное приспособление и датчик для большинства применений
- Программа TexturePro CT TA-CT-PRO-AY
- Датчик температуры DVP-94Y
- Калибровочный набор разновесов

Приспособления для СТЗ предназначены для повседневной работы, исследования широкого спектра самых разнообразных продуктов и материалов как в научных лабораториях, так и в лабораториях по контролю качества. Потенциал прибора легко оценить, взглянув на некоторые стандартные области его применения:




ТА-ВЕС

Ячейка обратной экструзии для смещения яблочного пюре, пудинга, йогурта и подобных продуктов.



ТА-АТТ

Тестер сцепляемости адгезива для измерения уровня сцепляемости чувствительных к давлению адгезивных материалов, таких как клейкая лента.

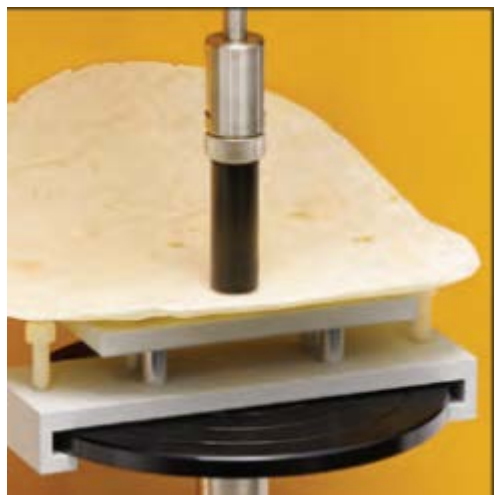

ТА-ЈРА

Малое крепление для испытания на прокол является небольшим держателем для испытания образцов на прокол с максимальным диаметром датчика 12,7 мм. Отверстие в креплении: 14 мм.



ТА-ЈТРВ

Уменьшенная версия трехточечного изгибного крепления, используется с лезвием ТА7 из набора датчиков общего применения.



TA-AVJ

Регулируемое зажимное крепление для фиксации небольших образцов для испытания на прокол. Может применяться для драже.



TA-10

Контактный датчик по Блуму GMIA и GME используется для определения характеристик гелей, включая капсулы, повязки на раны, гелевые смазки и полимерные гидрогели.



TA-JMPA

Уменьшенный узел множественных датчиков, состоящий из девяти 3-х миллиметровых датчиков и соответствующей опорной пластины, специально предназначенной для удержания девяти малых образцов нестандартной геометрии, таких как бобы, кукуруза, орехи или сухофрукты



TA-WSP

Пластина с проволочными ножницами обеспечивает прохождение разрезающей проволоки по всей длине образца. Используется для продуктов со значительной липкостью, которые оказывают сильное сопротивление разрезанию с помощью лезвия. Используются для сыра и масла.



TA-P-KIT2

Набор стандартных датчиков. Ряд цилиндрических (8), конических(3), шаровых (2), игольчатых (1),ножевых (1) и режущих проволочных (1) датчиков. Соответствует требованиям стандартов BS и AACC.



TA-STF

Насадка предназначена для измерения способности продукта распределяться тонким равномерным слоем.



TA-MA

Крепежное приспособление для анализа адгезии к слизистым оболочкам предназначено для количественного измерения адгезивности таблетки к поверхности слизистой оболочки с помощью имитации состояний/температур тела с последующим измерением требуемой силы, необходимой для отрыва таблетки в названных условиях.



TA-RCA

Узел с кулачковым роликом используется для испытания прочности на растяжение упаковочных материалов, ткани, полимерных пленок.




TA-CTP

Компрессионная верхняя пластина для приложения однородной силы сжатия к образцам с размерами вплоть до 10 x 15 см



TA-AACC36

Датчик для образцов ААСС для определения жесткости хлеба и анализа профиля текстуры.

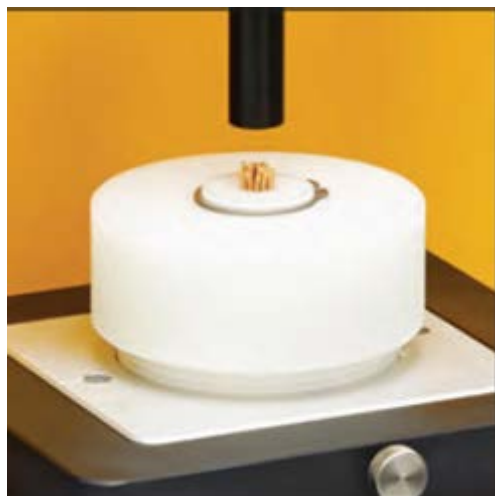

TA-DSJ

Крепежное приспособление для измерения липкости теста применяется в стандартном испытании измерения уровня липкости теста; эта характеристика является важным параметром при обработке сырого теста.



TA-DE

Крепежное приспособление для измерения уровня растяжимости теста, используемое для удержания пластины сырого теста или хлеба, такого как тортилья. Двухосная испытательная сила прилагается сферическим датчиком. В испытании измеряется сила и расстояние по мере растяжения образца до точки разрыва.



TA-DEC

Двойная экструзионная ячейка как для прямой, так и для обратной экструзии фруктового пюре, пудингов, йогурта или подобных продуктов.



TA-OC

Оттавская ячейка для экструзии неоднородных мягких образцов через одну или две сменных решетки. Используется для приготовленной пасты или нарезанных овощей и фруктов.



TA-TCA

Крепежное приспособление для изучения адгезии покрытия таблеток предназначено для количественного измерения адгезивных свойств покрытий из водяных пленок, таких как кишечнорастворимые пленки или пленки с непрерывным высвобождением лекарственного средства, к поверхности таблетки.



TA-EP

Крепежное приспособление для карандаша для глаз имитирует усилие, требуемое для использования карандаша, а также прочность на разрыв, необходимую для обычного использования продукта и сохранения его целостности при упаковке/транспортировке.



TA-BPS

Опора для блистерной упаковки – это приспособление имитирует нажатие пальца на блистерную упаковку с целью проверки сохранения целостности продукта при извлечении из упаковки



TA-CLT

Эластичность желатиновой капсулы – это приспособление количественно определяет силу, требуемую для раздавливания твердой гелевой капсулы и воздействие наполнения капсулы на ее оболочку, а также хрупкость/эластичность капсулы.

TA-DGA

Захваты для испытания на растяжение тонкой пленки упаковочного адгезива и прочность соединения фармацевтической упаковки.



ТА-СКА

Острые лезвия позволяют резать небольшие твёрдые продукты (жевательная резинка, орехи, конфеты) и определять силу сдвига без сдавливания очень мягких и хрупких продуктов (слоёные кондитерские изделия)

TA-KSC

Сдвиговая ячейка Крамера для комбинации испытаний на экструзию и разрезание со сдвигом. Используется для небольших фруктов и овощей, таких как томаты, виноград, финики, кукуруза и бобы.



TA-DGF

Пара зажимов для испытания на растяжение тонких пленок или целостности герметизации для упаковки.



TA-CJ

Крепежное приспособление для конфет, предназначенное для удерживания конфет и подобной кондитерской продукции при проведении испытания на проникновение. Предотвращает подъем образца во время отвода контактного датчика.



TA-VBJ

Врезной захват Володкевича для испытания силы надкусывания мясных продуктов с использованием сдвига и разреза.



TA-SBA

Ножевое полотно для продуктов, у которых важна характеристика сдвига и разреза: мясо, рыба, колбаса и т.д.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

**сайт: brookfield.pro-solution.ru | эл. почта: bfk@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70**